





Mi Smart Electric Toothbrush T500

fogkefe

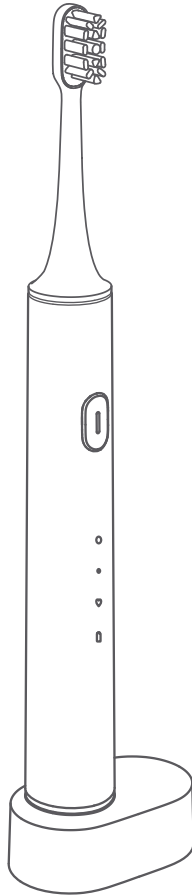

Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

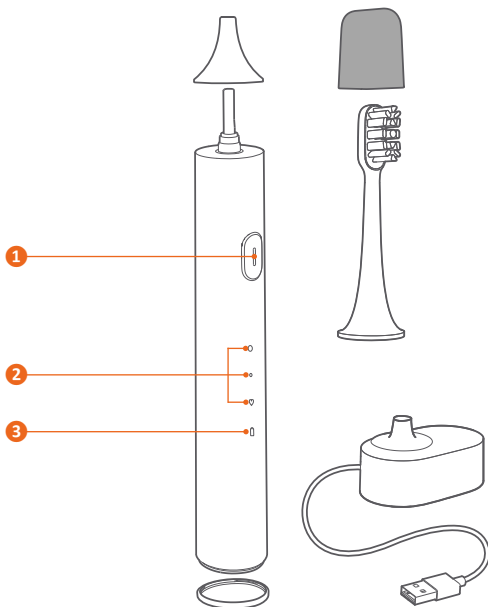


1. Nyomógomb
2. Üzemmódjelző
3. Állapotjelző

Használat

Helyezze a fogmosófejet a készülékre, és győződjön meg arról, hogy a kefe a megfelelő irányba néz! Ügyeljen, hogy a fogmosófej és a készülék között legyen egy vékony rés! A hézagra azért van szükség, hogy a rezgés során ne legyen súrlódás, és megfelelő legyen a teljesítmény.

A megkülönböztetéshez melléelt színes gyűrűk közül egyet helyezzen fel!

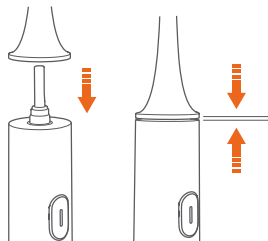

Helyezze áram alá az állványt, az állapotjelző a táblázat szerint jeleníti meg az egyes töltöttségi fokozatokat. A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése 100%-ra több, mint 12 órát vesz igénybe. Aktív Bluetooth kapcsolat esetén, töltés közben az állapotjelző háromszor villog és a Bluetooth kapcsolat fennmarad.

<10%	Piros villogás
10-20%	Piros
20-60%	Narancs
60-100%	Ciánkék

Bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot! Bekapcsolás után a gomb további megnyomásával 3 üzemmód közül lehet választani. A működés szüneteltetéséhez tartsa nyomva 1 másodpercig a nyomógombot! Ha 30 másodpercig nem folytatódik a működés, a fogkefe kikapcsol. Kikapcsolni a kedvenc üzemmódon állva (♡), a gomb egyszeri megnyomásával lehet, ha még nem telt el legalább 10 másodperc a bekapcsolás óta.

A fogkefe gyári alapállapotba állítható. Ehhez tartsa nyomva a nyomógombot 12 másodpercig!



Egészséges fogtisztítás

A fogakra 45 fokos szögben, lassan mozgassa a fogkefét, az íny és a fognyak vonala mentén.

A nyomógombot fogmosás közben is használhatja az üzemmódok közti váltásra.

Fogmosás közben a rezgés 30 másodpercenként egy pillanatra megáll. Ez jelzi a fogmosási pozíció váltását.

Ha nem szünetelteti a működést, a fogkefe, a fogmosási ciklus lejárta után kikapcsol. A ciklus időtartama az alkalmazásban állítható be.

A fogkefe, túlzott nyomás elleni védelemmel van ellátva. Folyamatosan figyeli a nyomás erősségét, és ha túl erős nyomást gyakorol a fogakra, az állapotjelző pirosan kezd villogni és rezgés erőssége is lecsökken.

A fogkefe háromféle üzemmódban használható

- Általános: napi rendszeres fogmosásához ajánlott
- Gyengéd: érzékeny fogak esetén
- Egyedi: alapbeállítás 2 perces időtartam (az értékek az alkalmazásban átállíthatók)

Fogmosás után a fogmosófejet folyó vízzel öblítse le!

Használat után tegye fel a védő kupakot, hogy higiénikusan maradjon!

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Engedélyezze a mobiltelefonon a Bluetooth kapcsolatot és győződjön meg arról, hogy a fogkefe be van kapcsolva! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd bökjön a Next gombra!

Műszaki paraméterek

- Bluetooth 4.0
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- IPX7 vízállóság
- kb. 18 nap üzemidő
- 700 mAh akkumulátor
- 12 óra töltésidő
- 2 W teljesítmény fogyasztás
- USB tápcsatlakozó
- DC 5 V, 500 mA
- Készülék méretek: 28,1×28,3×187,5 mm
- Készülék súly: 110 g
- Fogmosófej méretek: 24,6×24,6×85
- Fogmosófej súly: 8 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.