

# huslog

Testmasszírozó

TS-0434



## Felhasználói kézikönyv

## Biztonsági előírások

- A készülék felületei nagyon felforrósodhatnak! Legyen óvatos a használat során!
- Tartsa a készüléket, tartozékait és csomagolását gyermekektől távol! A kábelek és a műanyag csomagolás a gyermek nyaka köré tekeredhet vagy lenyelheti őket, ami fulladást okozhat.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében! Ne használja a készüléket a testrészek masszírozásán kívül más célra! A terméket nem állatokon való használatra tervezték! Ne használja a készüléket a testrészek masszírozásán kívül más célra!
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy hivatalos szervizközpont telepítheti vagy javíthatja! A jogosulatlan vagy nem minősített szerviz által végzett javítás a készülék károsodását és a garancia elvesztését okozhatja. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezésen a felhasználó által végzett jogosulatlan módosítások által okozott hibákért.
- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek, valamint csökkent szellemi és fizikai képességű személyek, akiknek nincs korábbi tapasztalatuk az elektronikus berendezések kezelésében! Csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett használhatják, miután elolvasták és megértették a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat.
- Óvja a készüléket víztől és egyéb folyadékoktól! Ne használja a készüléket magas páratartalmú környezetben, konyhában vagy fürdőszobában! A vízrézecskek nedvességet okozhatnak a készülékben, ami hátrányosan befolyásolja a működését, és károsíthatja a készüléket.
- A készüléket nem szabad poros körülmények között használni! Csatlakoztassa az egységet úgy, hogy ne sérüljön meg, és ne veszélyeztesse az embereket vagy az állatokat! Ne tegye ki a készüléket napfénynek, és ne használja hőtermelő berendezések (fűtőtestek, radiátorok stb.) közvetlen közelében! A műanyag részek deformálódhatnak, ami befolyásolhatja a készülék működését vagy teljes tönkremenetelét okozhatja.
- Ne tegye ki az akkumulátort nagyon magas vagy alacsony hőmérsékletnek (0–45 °C). A szélsőséges hőmérséklet befolyásolhatja az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Kerülje a folyadékokkal és fémtárgyakkal való érintkezést, mert az akkumulátor részleges vagy teljes károsodását okozhatja! Az akkumulátort rendeltetésének megfelelően kell használni. Ne tegye tönkre, ne károsítsa vagy ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert veszélyes lehet és tüzet okozhat! Az elhasználódott vagy sérült akkumulátort egy erre a célra szolgáló tárolóedénybe kell helyezni. Az akkumulátor túltöltött töltése károsodást okozhat, ezért ne töltsse a szükségesnél tovább! A készülékben lévő akkumulátor nem cserélhető.
- Ne használja a masszírozót orvos engedélye nélkül a következő esetekben: terhesség, rák, szívritmus-szabályozó, fém protézisek, közelmúltbeli műtét, csonttritkulás, epilepszia, trombózis, migrén, magas vérnyomás, vesekő, visszér, porckorongsér, spondylolisthesis, spondylosis, spondylolysis, akut, közelmúltbeli ízületi gyulladás!
- Ne masszírozza az arcizmokat, a gerincet (közvetlenül) vagy a csontot! Ha fájdalmat vagy kellemetlen érzést érez a masszázs során, azonnal hagyja abba a masszázst!

## Műszaki adatok

- Tápellátás: 5 V, 1 A
- Akkumulátor: Lítium-Ion, 7,4 V, 1200 mAh, 8,88 Wh
- Rezgésszám: 3300/perc

## A csomag tartalma


- Masszírozó
- 4×cserélhető masszírozófej
- Töltőkábel
- Felhasználói kézikönyv

Ha a csomagból bármelyik tartozék hiányzik vagy sérült, forduljon a forgalmazóhoz!

Javasoljuk, hogy őrizze meg a csomagolást, mert panasz esetén szükség lehet rá!

A felhasználói kézikönyv különböző nyelvi változata letölthető a Huslog weboldaláról:

<https://huslog.eu>

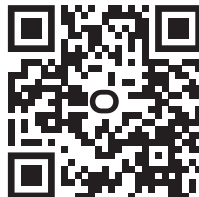

## Áttekintés



- A - Masszírozó
- B - Fogantyú
- C - Állapotjelző
- D - Funkciógomb
- E - Töltőcsatlakozó

## Használat

### Töltés

- Az első használat előtt a készülék akkumulátorát teljesen fel kell tölteni! Előfordulhat, hogy több töltési és kisütési ciklust kell végrehajtani az akkumulátor teljes kapacitásának eléréséhez.
- Kerülje az akkumulátor túlzott lemerülését. Ez károsíthatja vagy lerövidítheti élettartamát.
- A készülék töltés közben felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nem befolyásolhatja az eszköz tartósságát vagy teljesítményét.

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB Type-C kábellel egy 5 V, 1 A kimenetű áramforráshoz! A töltés automatikusan elindul, és az állapotjelző világítani kezd a töltöttségi szint függvényében (1 - 6 LED). Amikor az akkumulátor fel van töltve, mind a 6 LED világít. Ha a töltés befejeződött, húzza ki az töltőkábelt a készülékből és az áramforrásból!

A készülék töltés közben nem használható.

### Működtetés

Biztonsági okokból a masszírozó 15 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be a készüléket a további használatához!

Kerülje el egy terület hosszú távú masszírozását a masszázs során! Óvatosan mozgassa a készüléket masszírozás közben!

Tartsa nyomva a funkciógombot kb. 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához! A masszírozó a legalacsonyabb masszázsszintenztúson kapcsol be. A funkciógomb további megnyomásával a masszázsszintenztúsa növelhető. A negyedik szint elérésekor, a funkciógomb újabb megnyomásával a legalacsonyabb szintre vált. A masszázsszintenztúsi szintjét az állapotjelző jelzi, a világító LED-ek száma megfelel az aktuális masszázsszintenztúsnak.

Tartsa nyomva a funkciógombot kb. 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához!

A funkciógomb rövid megnyomása kijelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

### Masszírozófej cseréje és beállítása

A masszírozófejet csak kikapcsolt állapotban szabad cserélni.

Az eltávolításához az egyik kezével fogja meg a masszírozó testét, a másikkal pedig a masszírozófej nyakát! Húzza a két darabot ellentétes irányba, miközben forgassa a fejet a tengelye körül!

A fejet úgy szereljük fel, hogy a nyakát a masszírozótest mozgófejében található lyukba nyomjuk. A felszerelés után győződjön meg arról, hogy a fej megfelelően helyezkedik el!

## Karbantartás

A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében

- A tisztításhoz csak száraz ruhát használjon! Soha ne használjon magas koncentrációjú savakat, lúgokat vagy súrolószereket!
- A készüléket és tartozékait tartsa távol a gyermekektől!
- Kerülje a nagyon magas hőmérsékletet, mert lerövidítheti az alkatrészek élettartamát, megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket és tönkretelheti az akkumulátort!



A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően áthúzott szemeteskonténer szimbólum jelzi. Az ezzel a szimbólummal megjelölt termékeket használatuk után nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó úgy köteles megsemmisíteni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, hogy azt a kijelölt helyre szállítja, ahol az ilyen veszélyes hulladékot újrahasznosítják. Az ilyen típusú hulladékok jelzett helyeken történő felhalmozása és hasznosításának megfelelő folyamata hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő újrahasznosítása jótékony hatással van az emberi egészségre és a környezetre. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak környezetbarát módon történő elhelyezésével kapcsolatos információkért a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot az illetékes helyi hatósággal, hulladékgyűjtő ponttal vagy értékesítési ponttal, ahol a berendezést vásárolta.



A 2006/66/EK és a 2013/56/EU európai irányelvnek az akkumulátorok ártalmatlanításáról szóló módosításai szerint ez a termék áthúzott szemeteskuka szimbólummal van megjelölve. A szimbólum azt jelzi, hogy a termékben használt akkumulátorokat és elemeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem a törvényi irányelveknek és a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Az akkumulátorokat nem szabad válogatatlán települési hulladékkal együtt kidobni. Az elemek és akkumulátorok használóinak a rendelkezésre álló gyűjtőpontokat kell használniuk ezeknek az elemeknek a visszajuttatását, újrahasznosítását és ártalmatlanítását lehetővé tévő esetekben. Az EU-n belül az elemek és akkumulátorok begyűjtése és újrahasznosítása külön eljárások tárgyát képezi. Ha többet szeretne megtudni az elemek és akkumulátorok újrahasznosításának meglévő eljárásairól, kérjük, forduljon a helyi irodához vagy egy hulladékártalmatlanítási vagy -lerakási intézményhez.

## A kézikönyv használata

A gyártó előzetes írásos engedélye nélkül a jelen kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható vagy nem továbbítható semmilyen formában, akár elektronikus, akár mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, fotózást, illetve nem tárolható tároló- vagy információmegosztó rendszerben.

A használati útmutatóban használt képek és illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

Minden márká és terméknév az adott vállalatok védjegye.

## Garancia és szerviz

A készülékre 2 év garancia vonatkozik, az értékesítéstől számítva. Hiba esetén a terméket vissza kell juttatni abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ne feledje, hogy be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot! A készüléknek épnek kell lennie, és lehetőleg az eredeti csomagolásában kell elhelyezni!

## Nyilatkozat az EU irányelveknek való megfelelésről

Az mPTech Sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió úgynevezett „Új Megközelítés” irányelveinek alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Huslog termékek hivatalos forgalmazója

**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.