

huslog

Szájzuhany

AL-050231



Felhasználói kézikönyv

Biztonsági előírások

- A készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek nem használhatják, kivéve, ha a vákuumcsomagolásban tapasztalatot szereztek, felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! Felügyelet nélküli gyermekek nem tisztíthatják vagy tarthatják karban a készüléket.
- A készülék csak a mellékelt töltőkábellel használható!
- A készüléket csak megfelelően összeszerelt állapotban használja!
- A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja!
- Ne használja a sérült készüléket! Sérülés esetén ne próbálja megjavítani, vigye szakemberhez vagy a vásárlás helyére!
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektromos berendezések használata tilos, és ahol az interferenciát vagy egyéb veszélyeket okozhat!
- Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében!
- Gyermekek elől elzárva tartandó!
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék módosításából eredő hibáért.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében ne legyenek olyan tárgyak, amelyek megsérülhetnek, eltörhetnek vagy felborulhatnak! A tápkábelt úgy kell elvezetni, hogy ne érintkezzen magas hőmérsékletet generáló tárgyakkal, és ne legyen kitéve mechanikai sérülésnek! A töltőtálcá kábele nem akadályozhatja a személyek és háziállatok mozgását, mivel ez megbotláshoz, felboruláshoz vagy sérüléshez vezethet!
- Ne tegye ki a készüléket nagyon alacsony vagy magas hőmérsékletnek! Tárolási hőmérséklet: 0-40 °C. A műanyagból készült alkatrészek deformálódhatnak, ami befolyásolhatja a készülék működését, vagy annak teljes károsodásához vezethet.
- Ne tegye ki a töltőkábelt víznek vagy más folyadéknak! Ez hátrányosan befolyásolhatja a készülék működését és élettartamát, rövidzárlatot vagy akár áramütést is okozhat. Ne merítse vízbe 1 méternél mélyebbre és 30 percnél hosszabb időre!
- Ne tegye ki a beépített akkumulátort nagyon alacsony vagy magas hőmérsékletnek! Tárolási hőmérséklet: 0-45 °C. A szélsőséges hőmérséklet befolyásolhatja élettartamot. Kerülje az akkumulátor érintkezését folyadékokkal és fémtárgyakkal, mert az teljes vagy részleges károsodásához vezethet! Ne szerelje szét, módosítsa, zárja rövidre, és ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert ez robbanást és tüzet okozhat! Helyezze a használt vagy sérült akkumulátort egy speciális tartályba! A készülékben lévő akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki!

Műszaki adatok

- Tápellátás: 5 V, 1 A
- Akkumulátor: Lítium-Ion, 3,7 V, 1400 mAh, 5,18 Wh
- IPX7 vízállóság

A csomag tartalma


- Szájuhany
- 2 db cserélhető fej
- Töltőkábel
- Felhasználói kézikönyv

Ha a csomagból bármelyik tartozék hiányzik vagy sérült, forduljon a forgalmazóhoz!

Javasoljuk, hogy őrizze meg a csomagolást, mert panasz esetén szükség lehet rá!

A felhasználói kézikönyv különböző nyelvi változata letölthető a Huslog weboldaláról:

<https://huslog.eu>

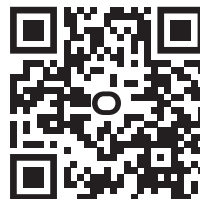

Áttekintés

- A - Cserélhető fej
- B - Rögzítőgomb
- C - Indítógomb
- D - Üzem mód gomb
- E - Állapotjelző
- F - Töltőcsatlakozó
- G - Víz tartály
- H - Víz tartály dugó



Használat

A használat megkezdése előtt, valamint a befejezése után mindig ellenőrizze az egyes alkatrészeket, hogy nem sérültek-e! A sérült alkatrészeket nem szabad használni, mert személyi sérülést okozhatnak.

Összeszerelés és szétszerelés

Vegye ki a szájuhanyt és az egyik fejet a csomagolásból! Helyezze a fúvókát a készülék tetején lévő lyukba, és finoman nyomja meg! A rögzítőgombnak kattannia kell.

Győződjön meg arról, hogy a fej megfelelően van felszerelve, és stabilan van a helyén!

A fej eltávolításához nyomja meg a rögzítőgombot, és óvatosan húzza felfelé a fejet!

Töltés

A készülék akkumulátorainak töltése előtt győződjön meg arról, hogy a keze száraz!

Ne töltse és ne tárolja a készüléket 0 °C alatt vagy 40 °C felett, mert ez befolyásolja a működést és a töltés hosszát!

A készülék töltés közben kissé melegedhet, ez teljesen normális jelenség.

Soha ne merítse le teljesen az akkumulátort, mert ez az akkumulátor és a készülék maradandó károsodásához vezethet!

A beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki! Az akkumulátor cseréjéhez forduljon a gyártó szervizéhez!

Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábel dugóját egy 5 V/1 A hálózati adapterhez (nem tartozék)! Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék elején található töltőcsatlakozóhoz!

A töltés megkezdésekor a töltésjelző (CH) villogni kezd. Amikor a töltés befejeződött, a töltésjelző kialszik.

Üzem módok

A szájuhany négy működési programot kínál:

NORMAL – alap nyomás

SOFT – gyengéd nyomás

PULSE – pulzáló nyomás

CUSTOM/CH – egyéni beállítás

A készülék az indítógombbal kapcsol be és ki. Az üzemmódgomb megnyomásával a készülék bekapcsolása után a különböző üzemmódok között lehet váltani. Az aktuálisan kiválasztott üzemmódban az ahhoz tartozó állapotjelző világít.

Egyedi állásban az üzemmódgomb hosszú ideig tartó nyomva tartása bekapcsolja az egyedi nyomás beállítását. A beállítás 10 és 90 psi nyomástartományban lehetséges az üzemmódgomb rövid megnyomásával. A kiválasztást megerősíti az üzemmódgomb újabb hosszú lenyomása.

Működtetés

Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, majd nyissa ki a víztartály dugóját! A készüléket vízszintesen helyezze el úgy, hogy a nyitott betöltőnyílás felfelé nézzen! Töltse fel a tartályt lehetőleg szűrt vízzel, és zárja le a víztartályt! A víztartályt vízen kívül más folyadékkal nem töltse fel, különösen szájhygiénés folyadékkal, szódabikarbóna oldatokkal, gyógynövény infúziókkal! Ez lerakódásokhoz, szennyeződésekhez és elszíneződéshez, szélsőséges esetekben ez a készülék károsodásához vezethet.

Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos problémák esetén kérjük, olvassa el az alábbi tanácsokat!

A szájhüvely nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve! Lehet, hogy az akkumulátor élettartama lejárt. Forduljon a szervizhez!

A víznyomás gyenge

Ellenőrizze, hogy a fej nem dugult-e el, vagy nem sérült!

Ellenőrizze, hogy a víztartály tiszta-e! A belsejében felhalmozódó lerakódások befolyásolhatják a működést.

A szájhüvely nem töltődik

Ellenőrizze, hogy a töltőkábel nem sérült-e, csatlakoztatva van-e áramforráshoz!

Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter, amelyhez a töltőkábel csatlakoztatva van, rendben van-e!

Lehet, hogy az akkumulátor élettartama lejárt. Forduljon a szervizhez!

Ha a probléma nem oldódott meg, forduljon a szervizhez!

Tisztítás és karbantartás

A rendszeres és szakszerűen elvégzett tisztítás és karbantartás biztosítja a készülék hosszú élettartamát és problémamentes működését.

Tisztítás és karbantartás csak kikapcsolt állapotban mellett végezhető!

A szájhüvely egyetlen részét sem szabad mosogatógépben tisztítani!

Ne merítse a készüléket vízbe 1 méternél mélyebbre és 30 percnél hosszabb időre!

A készülék alkatrészei alacsony nyomású és hőmérsékleten folyóvízben tisztíthatók. Erős szennyeződés esetén enyhe tisztítószerrel lehet használni. Ezután papír- vagy textiltörülővel alaposan szárítsa meg a készülék alkatrészeinek felületét, és hagyja teljesen megszáradni! A fejet folyó víz alatt le kell mosni, majd hagyni kell megszáradni.

Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt a felhalmozódó üledékektől és vízkőtől! Ebből a célból megfelelő eszközöket használjon a vízkőlerakódások eltávolítására! Ezek por vagy folyadék formájában fordulnak elő. Kövesse a hozzájuk mellékelt használati utasítást! A használat után alaposan öblítse ki a tartály belsejét, és hagyja megszáradni!



A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően áthúzott szemeteskonténer szimbólum jelzi. Az ezzel a szimbólummal megjelölt termékeket használatuk után nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó úgy köteles megsemmisíteni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, hogy azt a kijelölt helyre szállítja, ahol az ilyen veszélyes hulladékot újrahasznosítják. Az ilyen típusú hulladékok jelzett helyeken történő felhalmozása

és hasznosításának megfelelő folyamata hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő újrahasznosítása jótékony hatással van az emberi egészségre és a környezetre. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak környezetbarát módon történő elhelyezésével kapcsolatos információkért a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot az illetékes helyi hatósággal, hulladékgyűjtő ponttal vagy értékesítési ponttal, ahol a berendezést vásárolta.



A 2013/56/EU európai irányelvnek az akkumulátorok ártalmatlanításáról szóló módosításai szerint ez a termék áthúzott szemeteskuka szimbólummal van megjelölve. A szimbólum azt jelzi, hogy a termékben használt akkumulátorokat és elemeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem a törvényi irányelveknek és a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Az akkumulátorokat nem szabad válogatatlan települési hulladékkal együtt kidobni. Az elemek és akkumulátorok használóinak rendelkezésre álló gyűjtőpontokat kell használniuk ezeknek az elemeknek a visszajuttatását, újrahasznosítását és ártalmatlanítását lehetővé tévő esetekben. Az EU-n belül az elemek és akkumulátorok begyűjtése és újrahasznosítása külön eljárások tárgyát képezi. Ha többet szeretne megtudni az elemek és akkumulátorok újrahasznosításának meglévő eljárásairól, kérjük, forduljon a helyi irodához vagy egy hulladékártalmatlanítási vagy -lerakási intézményhez.

A kézikönyv használata

A gyártó előzetes írásos engedélye nélkül a jelen kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható vagy nem továbbítható semmilyen formában, akár elektronikus, akár mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, fotózást, illetve nem tárolható tároló- vagy információmegosztó rendszerben.

A használati útmutatóban felhasznált képek és illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

Minden márka és terméknév az adott vállalatok védjegye.

Garancia és szervíz

A készülékre 2 év garancia vonatkozik, az értékesítéstől számítva. Hiba esetén a terméket vissza kell juttatni abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ne feledje, hogy be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot! A készüléknek épnek kell lennie, és lehetőleg az eredeti csomagolásában kell elhelyezni!

Nyilatkozat az EU irányelveknek való megfelelésről

Az mPTech Sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió úgynevezett „Új Megközelítés” irányelveinek alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Huslog** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.